

VIVAMAX – Otthon az egészségben!



HASZNÁLATI ÉS KEZELÉSI ÚTMUTATÓ
HOT&COOL ARCKEZELŐ KÉSZÜLÉKHEZ
EMS TECHNOLOGIÁVAL



Cikkszám: GYVAK1

Üzembehelyezés előtt figyelmesen olvassa el a használati és kezelési útmutatót!

Kedves Vásárlónk!

Köszönjük, hogy az általunk forgalmazott terméket választotta. A rendeltetésszerű, biztonságos és hatékony használat, a termék élettartamának meghosszabbítása, valamint az Ön biztonsága érdekében kérjük, tanulmányozza át alaposan (és őrizze is meg) a használati és kezelési útmutatót.

Tartalom

Bevezetés.....	2
Általános leírás	2
A csomag tartalma.....	2
Biztonsági figyelmeztetések	3
Készülék hatásmechanizmusának bemutatása	4
Mikrovibrációs mód:.....	4
Váltakozó hideg-meleg, avagy hőszokk terápia	4
EMS (elektromos izomstimulációs) mód:.....	4
LED fotonterápiás mód:.....	5
A készülék részei.....	5
Műszaki adatok.....	6
A készülék használata	6
Felhasználási javaslatok egyes kezelési módokhoz	7
Az újratölthető lítium-ion akkumulátor használata	8
Tárolás és tisztítás	8
Hulladékkezelés	9
Webes támogatás és Vivamax termékajánló	9

Bevezetés

Általános leírás

GYVAK1 Hot&Cool arckezelő készülék EMS technológiával a sugárzóan fiatalos és ragyogó arcbőrért!

A készülék mikrovibrációs funkció, LED fotonterápia, továbbá a hőszokk terápia alkalmazásával és az elektromos izomstimuláció révén arcát üdévé és simábbá varázsolja, továbbá hozzájárulhat a megereszkedett bőr feszesebbé tételéhez, a ráncok mélységének csökkentéséhez és kialakulásuknak megelőzéséhez, a bőrhibák eltüntetéséhez, a pórusok összehúzásához és a kollagéntermelés serkentéséhez is. Alkalmazhatja arcán és nyakán egyaránt. Méretéből és akkumulátoros kialakításából adódóan könnyedén hordozható, így otthonában, kényelmesen a kanapén ülve vagy utazás közben használhatja. A készülék ergonomikus és áramvonalas kialakítása pedig kényelmes és biztonságos fogást biztosít a kezelése során.

A csomag tartalma

- 1 db Hot&Cool arckezelő készülék EMS technológiával
- 1 db USB töltőkábel

- 1 db használati és kezelési útmutató
- 1 db tartó állvány

Biztonsági figyelmeztetések

- Használat előtt olvassa át alaposan a használat és kezelési útmutatóban leírtakat!
- Kizárólag rendeltetésszerűen használja a készüléket, ahogyan azt a használati és kezelési útmutatóban olvasta! A rendeltetésszerű használattól való eltérés a garancia elvesztését vonja maga után.
- Ne használjon a készülékhez olyan alkatrészeket, kiegészítőket, melyek nincsenek a csomagolásban! Ne próbálja önmaga megszerelni, hanem kérdés vagy meghibásodás esetén forduljon a készülék forgalmazójához!
- Soha ne hagyja az áram alá helyezett készüléket felügyelet nélkül! Amikor nem használja, mindig áramtalanítsa!
- Nem javasoljuk, hogy folyamatosan 15-20 percnél hosszabb ideig használja a készüléket.
- A készüléket és a kábelt is tartsa távol meleg (radiátor, tűzhely, kályha, erős napsütés) vagy magas páratartalmú (fürdőszoba) felületektől és helyektől, mivel az tűzveszélyes, illetve áramütéshez vezethet.
- Biztosítsa kellő körültekintéssel, hogy gyermekek ne használják a készüléket!
- 18 év alattiak és mozgássérült személyek kizárólag felügyelet mellett használhatják a készüléket!
- Amikor a készülék kezelő felülete hidegre vált, a készülék energiaigénye nagy, így a készülékbe helyezett ventilátorok csak késleltetve tudják elvezetni a hőt. Ezért a funkció használata után, a következő funkció bekapcsolása előtt 10 percig ne használja a készüléket
- Ne aludjon el a készülék használata közben!
- A készüléket kizárólag otthoni használatra tervezték, nem minősül orvostechnikai eszköznek.



Vigázat!

1. Ne használja tovább a készüléket, ha túlmelegedést észlel, az égési sérülések elkerülése érdekében!
2. Ne dobálja, ne ütögesse és óvja az éles tárgytól!
3. A készülék alkalmazása során mindig használjon krémet vagy más, a kezelés céljából megfelelő kontakt anyagot!
4. Ha a töltőkábel sérült, vagy, ha a készülék vizes lesz vagy vízbe esik, ne helyezze áram alá és ne használja a készüléket! Forduljon a készülék forgalmazójához!
5. Ha bármilyen egészségügyi panasa van, használat előtt kérje ki orvosa véleményét!

Az alábbi betegségekben, illetve tünetekben szenvedők **nem** használhatják a készüléket:

- 1) Rosszindulatú daganat, rákos megbetegedés, szívpanaszok és beépített szívritmus szabályzó vagy műtűdő/műszív esetén;
- 2) Vérkeringési problémák-, szív keringési zavarai-, szívkoszorúerek megbetegedései- és szívritmuszavar vagy magas vérnyomás esetén;
- 3) Bőrfertőzés vagy vérző testrész esetén;
- 4) Ne használja a terméket az alábbi esetekben: nyílt seben, nyálkahártyán, érzékeny (idegi) pontokon, műtési hegeken, napozás során leégett bőrfelületen, kozmetikumokra érzékeny bőrfelületen;
- 5) Betegségek esetén, mint pl. lázállapot, akut gyulladás, amikor a meleg/ hőhatás alkalmazása tilos;

- 6) Olyan betegeknél, akiknél a szemgolyó, az agy, a gerincvelő besugárzása tilos;
- 7) Tumor (rosszindulatú daganat) esetén (gyógyult állapotnál sem!);
- 8) Tuberkulózis és gyomorfekély esetén;
- 9) Állkapocs implantátum esetén az orvos véleményét ki kell kérni;
- 10) Akut ízületi reuma esetén;
- 11) Sugárterápia után;
- 12) Megváltozott bőrkép esetén (fertőzőes betegségek, bőrrák, gyulladások, plasztika, bőrfeszítés);
- 13) Tobozmirigy hézag (rés) területén, nem kezelhető a beteg magasabban, mint a harmadik nyakcsigolya magassága.

Készülék hatásmechanizmusának bemutatása

Mikrovibrációs mód:

Arcunkon legalább 3 millió pórus található. A hagyományos sminklemosó vagy arctisztító folyadékok használata során csupán az arcbőr felszínét tisztítjuk, töröljük át anélkül, hogy a pórusokban mélyebben lerakódott, olajos szennyeződések is eltávolítanánk. Az innovatív ultrahangos mikrovibráció során kibocsátott magas frekvenciájú rezgéseknek köszönhetően a szennyeződések egészen a pórusok mélyéről is kitisztíthatók, így bőrünk fellélegezhet és puhább, kellemesebb tapintásúvá válhat.

Váltakozó hideg-meleg, avagy hőszokk terápia

Kutatások igazolják, hogy amennyiben az arcbőrt egy kezelés során ismétlődően 42 °C-ra melegítünk vissza, az segíti a HSP (hőszokk) fehérje termelődését, amely hozzájárul a sejtek regenerációjához, a bőr rugalmasabbá és ellenállóbbá tételéhez. A **42°C° fokon** történő arckezelés **tágítja a pórusokat a hatékonyabb mélytisztításhoz**, illetve a verejtéktermelés révén a **bőr salakanyagainak kiürülését eredményezi**. A kitágult pórusok **megkönnyítik a hatóanyagok bejutását** is, amelyek így eredményesebben szívódnak fel, mint hőhatás alkalmazása nélkül. A kezelési szakasz második fázisában a kezelőfelület **hidegre (6°C°-ra) váltásával** pedig a pórusok összehúzódnak, amely biztosítja a **tápanyagok megtartását**. A hőszokk terápia alkalmazása stimulálja a bőr mélyebb rétegeinek keringését és a sejtek anyagcseréjét is. Egyszerre segíti a szem alatti sötét karikák elhalványítását, a szemkörnyéki ráncok csökkentését és a bőrt is üdőbbé, ragyogóbbá teszi. Mikrovibrációs arckezeléssel kiegészítve feszebb és frissebb arcbőrt eredményez.

Tipp: A bőr tisztítását követően elsőként olyan kezelési módot válasszunk, amelyben a készülék kezelőfelülete felmelegszik, míg zárasként, a tápanyagok megtartásához válasszuk a „Cool” módot!

EMS (elektromos izomstimulációs) mód:

Az elektromos impulzusok aktiválják a bőr sejtjeit, serkentik a kollagéntermelést, rugalmasabbá teszik a bőrt és kisimítják a ráncokat, ezáltal a kezelt felület simábbá és egészségesebb megjelenésűvé válik.

Hideg hatás:

1. Feszebbé és rugalmasabbá teszi a bőrt.
2. Összehúzza a pórusokat, biztosítja a bőr hidratáltságát.
3. Nyugtatja az arcizmokat, enyhíti a bőr fáradtságát.

Meleg hatás:

1. Ellazítja az izmokat, csökkenti a fájdalmat.
2. Stimulálja a vérkeringést, tágítja a pórusokat, segíti a krémek, szérumok hatékonyabb bevitelét, a bőrt rugalmasabbá és hidratáltabbá teszi.

3. Mélytisztítás során egy kozmetikai tisztítókendő alkalmazásával könnyedén eltávolíthatóak a mitteszerék és egyéb bőrből eltávozó salakanyagok és szennyeződések.

LED fotonterápiás mód:


A készülék a beépített LED lámpákon keresztül természetes fényhullámokat juttat be a bőrbe. A fényt alkotó fotonok energiát hordoznak, melyek aktiválják a bőrben található fényérzékelő sejteket. Ezek a receptorok a felvett fényt energiává alakítják, így segíthetik a bőrsejtek regenerálódását.


Piros fény: aktivizál, élénkít. Hullámhossza: 620 nm (nanométer) (+ - 10nm). A 18 beépített LED lámpa a bőr mélységében eléri a 630 nm-t, ezáltal serkenti a vérkeringést és a kollagéntermelést, javítja a bőr rugalmasságát és simábbá, hidratáltabbá teszi. Kifejezetten ajánlott ráncos, megereszkedett bőrre.

Kék fény: nyugtató, gyulladáscsökkentő hatású. Hullámhossza: 470 nm (nanométer) (+ - 10nm). A 18 beépített LED lámpa a bőr mélységében eléri a 480 nm-t, ezáltal semlegesítheti a baktériumokat, javíthatja a vérkeringést, csökkenheti a gyulladásokat és a pattanások számát.

A készülék részei

- | | |
|--|--|
| 1. Hideg-meleg rozsdamentes acél kezelőfelület | 2. LCD kijelző |
| 3. Töltőkábel csatlakozó nyílása | 4. USB töltőkábel |
| 5. Be/kikapcsoló és mód kiválasztó gomb | 6. LED fotonterápia be/kikapcsoló gomb |
| 7. EMS-erősség- és hőmérsékletszabályozó | 8. Műanyag keret (kozmetikai tisztítókendő rögzítéséhez) |
| 9. Tartó állvány | |

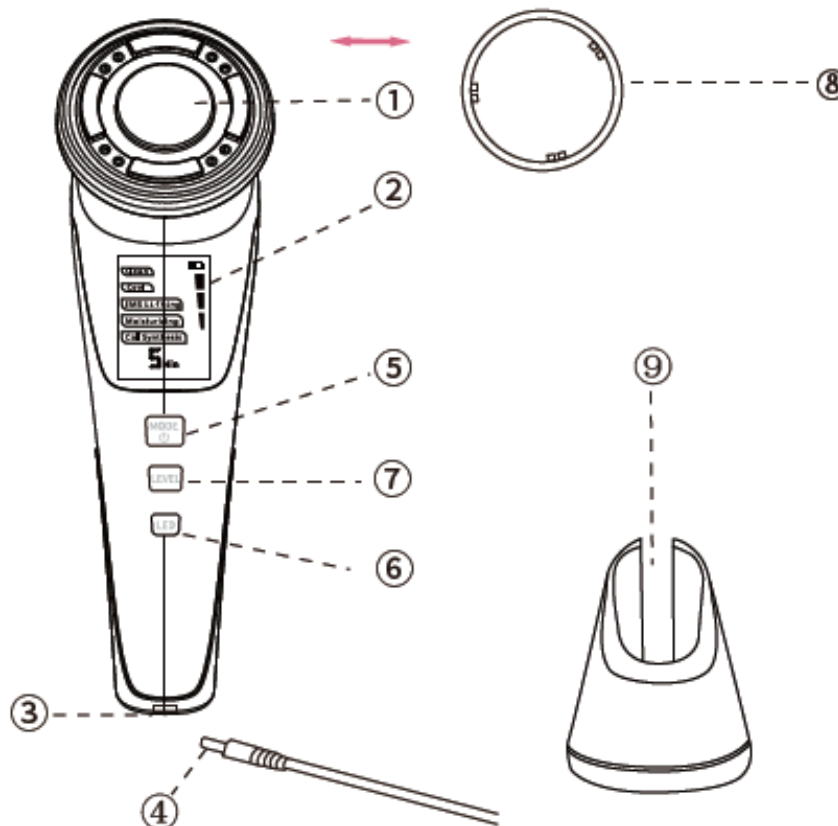

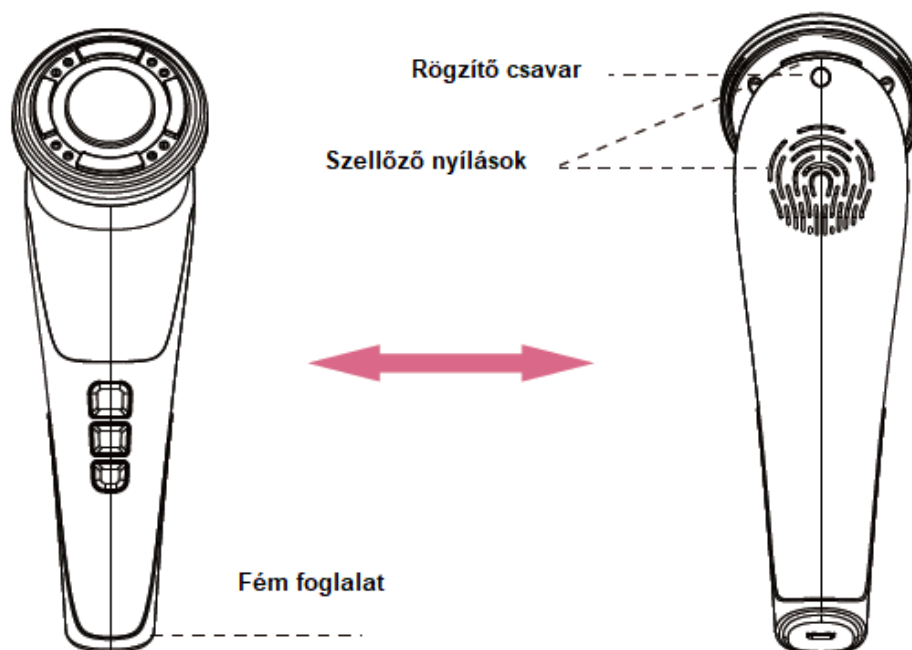


Műszaki adatok


Cikkszám	GYVAK1
Készülék mérete	175*55*67 mm
Doboz mérete	215*150*80 mm
Súly	145 g
Bemeneti feszültség	DC 5V
Rezgés frekvencia (RPM)	8000 (+/-10) RPM
Töltési áramerősség	500 mAh
Akkumulátor kapacitása	1000 mAh
Kezelőfej hőmérséklete	6-42 C° (+-5C°)
Töltési idő	2,5 óra
Maximális teljesítmény	8,5 W
Készenléti idő	45 nap
Kezelési idő/alkalom	5 perc vagy 2 perc

A készülék használata


1. Óvatosan vegye ki a készüléket a dobozából és ellenőrizze, hogy minden tartozéka hiánytalanul megvan-e.
2. Első használat előtt tölts fel az akkumulátort (kb. 2,5 órát vesz igénybe a töltés), majd húzza ki a csatlakozó kábelt a készülékből.

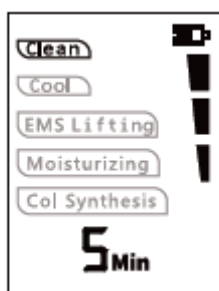

3. **Tisztító (Clean) mód:** A készülék bekapcsolásához nyomja meg a be-és kikapcsoló/MODE gombot legalább 3 másodpercig. (5-ös számmal jelölve) Alap beállítás szerint a készülék tisztító módban indul el, 1. intenzitási szinten. Ebben a módban a készülék vibrációt és hőterápiás kezelést is alkalmaz. A hőmérséklet igényre szabottan 3 fokozatban módosítható a LEVEL gombbal (7-es számmal jelölve). A **LED fotonterápiát** a LED gombbal (6-os számmal

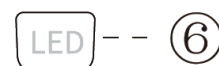


jelölve) ebben és bármely más módban is bekapcsolhatja és egyidejűleg alkalmazhatja. (A tisztítómód automatikusan 5 percig tart.)

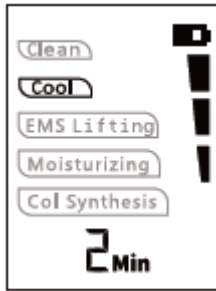


4. „Cool” mód hideg felülettel történő arcvasalással


Nyomja meg a be-és kikapcsoló/MODE gombot újból és a készülék tovább lép a „Cool” módra, amelyben a kezelőfelület 6 fokosra hűl, vibrációval kiegészítve. A hőmérséklet igényre szabottan 3 fokozatban módosítható a LEVEL gombbal (7-es számmal jelölve). (A „Cool” mód automatikusan 2 percig tart, a program lejártát követően a ventilátor további 30 másodpercig hűti a készüléket.)

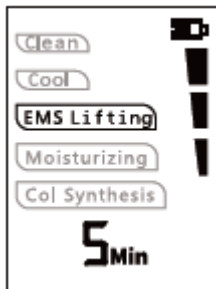

5. **EMS (elektromos izomstimulációs) bőrfeszítő mód:** A be- és kikapcsoló/MODE gomb többszöri megnyomásával lépegessen át a EMS bőrfeszítő módba, amelyben a kezelőfelület magas frekvenciájú elektromos impulzusokat bocsát ki, vibrációval kiegészítve. Az impulzusok erőssége igényre szabottan 3 fokozatban módosítható a LEVEL gombbal (7-es számmal jelölve). (Az EMS bőrfeszítő mód automatikusan 5 percig tart.)

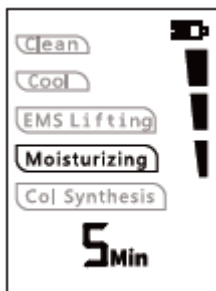

6. **Hidratáló (Moisturizing) mód:** A be- és kikapcsoló/MODE gomb többszöri megnyomásával lépegessen át a hidratáló módba, amelyben a kezelőfelület magas frekvenciájú elektromos impulzusokat bocsát ki, melegítő funkcióval és vibrációval kiegészítve. Az impulzusok erőssége igényre szabottan 3 fokozatban módosítható a LEVEL gombbal (7-es számmal jelölve). (A hidratáló mód automatikusan 5 percig tart.)

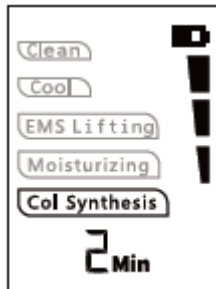

7. **Kollagén stimulációs (Col Synthesis) mód:** A be- és kikapcsoló/MODE gomb többszöri megnyomásával lépegessen át a kollagén stimulációs módba, amelyben a kezelőfelület magas frekvenciájú elektromos impulzusokat bocsát ki, a kezelőfelület 6C°-ra történő lehűtésével és mikrovibrációs funkcióval kiegészítve. Az impulzusok erőssége igényre szabottan 3 fokozatban módosítható a LEVEL gombbal (7-es számmal jelölve). (A kollagén stimulációs mód automatikusan 2 percig tart.)

Felhasználási javaslatok egyes kezelési módokhoz

1. Tisztító mód

Használjon kozmetikai tisztítókendőt a tisztító mód alkalmazása során! Távolítsa el a műanyag keretet/kört a készülék kezelőfelületének pereméről, rögzítse a tisztítókendőt és nyomjon rá sminklemosó folyadékot vagy micellás vizet. Ezután indítsa el a tisztító módot a korábbiakban leírtak szerint, amely a kezelőfelület által kibocsátott hő és vibráció segítségével tágtítja a pórusokat és segíti a szennyeződések, salakanyagok és mitesszerek eltávolítását.

2. „Cool” mód hideg felülettel történő arcvasalással

Vigye fel a kiválasztott arcmaszkot a bőrre és kapcsolja be a „Cool” módot, amely a pórusokat hatékonyan összehúzza, ily módon elősegíti a bőr hidratáltságának megőrzését.

3. EMS (elektromos izomstimulációs) bőrfeszítő mód

Az arcbőr tisztítását követően vigye fel a kiválasztott bőrápoló krémet vagy szérumot az arcára és kapcsolja be az EMS módot. Az elektromos impulzusok stimulálják az arc izmait és a bőrt még üdőbbé és rugalmasabbá teszik. A kezelés segít eltüntetni az apróbb szarkalábakat és ráncokat, visszaállítja a bőr fiatalságát, simaságát és puhaságát.

4. Hidratáló mód

Az arcbőr tisztítását követően vigye fel a kiválasztott bőrápoló krémet vagy szérumot az arcára és kapcsolja be a hidratáló módot, amellyel a felvitt anyagok nagyobb hatékonysággal szívódnak fel.

5. Kollagén stimulációs mód

Miután a felvitt krémek vagy szérumok felszívódtak, alkalmazza a kollagén stimulációs módot, amely összehúzza a pórusokat, így a bőr magába szívja és bent tartja a hatóanyagokat. Az elektromos impulzusok stimulálják a bőr pórusait és serkentik a kollagén termelést, ezáltal lassítják a bőr öregedési folyamatait és sokkal fiatalabb megjelenést kölcsönöznek.

Bőrének igényeitől függően bármely programmal egyidőben bekapcsolható a piros vagy kék LED fotonterápiás mód.

Az újratölthető lítium-ion akkumulátor használata

Az akkumulátorra rendeltetésszerű használat mellett 1 év jótállás érvényes. Kérjük, hogy alaposan olvassa át a használati útmutatót! A helytelenül, nem a leírtaknak megfelelően kezelt akkumulátorok a felhasználó hibájából hamarabb tönkre mehetnek, bizonyos esetekben használhatatlanná válhatnak. Az ilyen, nem rendeltetésszerű használatból eredő meghibásodásokra a garancia nem érvényes!

- Első használat előtt legalább 2,5 órán keresztül töltsen az akkumulátort a teljes töltöttség elérése érdekében.
- A készülék működési ideje teljes töltöttséggel felhasználási intenzitástól függően kb. 40 perc.
- A töltéshez csatlakoztassa az USB vezeték egyik végét a készülék alján található csatlakozóba, majd vezeték másik végét csatlakoztassa egy adapterhez.
- Az optimális, fent megadott töltési idő eléréséhez DC 5V adapter ajánlott, más esetben az akkumulátor teljes feltöltése hosszabb időt is igénybe vehet. Gyorstöltő (turbó töltő) használatát nem ajánljuk.
- A lítium-ion akkumulátor esetében nincs memória hatás, így bármikor tölthető, ezért javasoljuk, hogy amikor csak teheti, töltsen fel.

Tárolás és tisztítás előtt kapcsolja ki a készüléket, ügyeljen arra, hogy az USB töltőkábel ne legyen hozzá csatlakoztatva.

Tárolás és tisztítás

A/ Tárolás

Amikor nem használja a készüléket, tegye vissza a dobozába, tárolja száraz, hűvös helyen! Tartsa távol éles tárgyaktól, melyek kiszakíthatják a készülék borítását. Ne tekerje a kábelt a készülék köré! Ne lógassa fel a készüléket az USB kábelnél fogva!

B/ Tisztítás

Tisztítás előtt áramtalanítsa a készüléket, és várja meg, míg a motor kihűl! (Ha a tisztítás előtt használta, akkor a kihűlés eltarthat néhány percig.) Kizárólag tiszta, puha, vagy maximum enyhén nedves ronggyal tisztítsa!

- Ne merítse folyadékba a tisztításhoz!
- Tisztításhoz ne használjon oldószert, benzint, kerozint, festékoldót, üvegtisztítót és erős szőrű keféket! Ezek mind tönkre tehetik a készülék felületét.
- Ne próbálja önmaga megszerelni, mert ez a garancia elvesztését vonja maga után!

Hulladékkezelés

Ezt a készüléket nem szabad kidobni a háztartási szemétbe.

Minden egyes fogyasztó köteles minden elektromos vagy elektronikus készüléket leadni lakóhelyének gyűjtőhelyén vagy a kereskedőnél - függetlenül attól, hogy tartalmaz-e káros anyagot vagy nem – annak érdekében, hogy azt továbbítani lehessen környezetkímélő ártalmatlanításra!



Ártalmatlanítás tekintetében forduljon az illetékes helyi hatóságokhoz vagy a kereskedőkhöz!

Webes támogatás és Vivamax termékajánló

A www.vivamax.hu weboldalunkon további hasznos termékinformációkat és leírásokat talál. Oldalunkon megtekintheti térképes üzletkeresőnket, teljes egészségmegőrző választékunkat, valamint letöltheti időszakos akciós kiadványainkat.

Az Ön által vásárolt készülék mellett ajánljuk figyelmébe az alábbi termékeket is, melyeket megtalál weboldalunkon:

- Vivamax polarizált fényű lámpa
- Vivamax DeLuxe masszázssülés állítható nyakmasszázs
- Vivamax Shiatsu univerzális masszírozó
- Vivamax DeLuxe lábmasszírozó készülék légpárnákkal
- Vivamax "IntenseGun Lite" masszázspisztoly
- Herbal Freeze gél 5 féle gyógynövénnyel

Lájkolja Facebook oldalunkat, vagy iratkozzon fel hírlevelünkre és értesüljön első kézből akciós ajánlatainkról, újdonságainkról!

 **VIVAMAX** – Otthon az egészségben!

Magyarországi importőr és forgalmazó:



Vivaldi Kft.
2120 Dunakeszi
Pallag u. 37.
Tel.: 06-1/889-9080